



INSTRUCTIVO DE USO

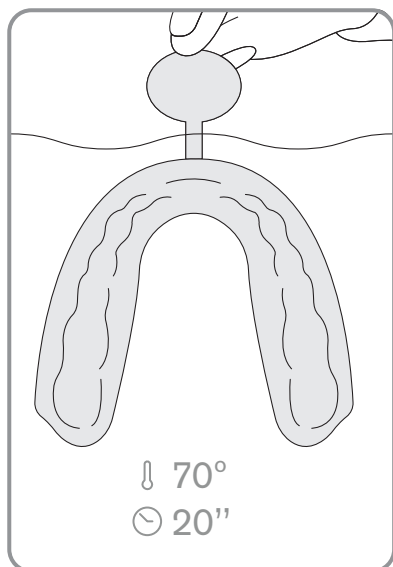

1

Sujetar el protector por el saliente y colocarlo en agua caliente a una temperatura de 70° durante 20 segundos.

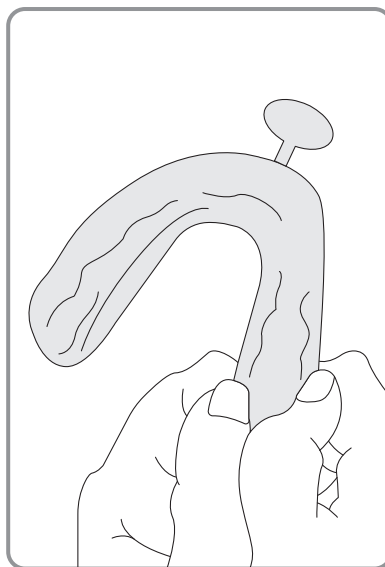


2

Retirar, escurrir el agua y ensanchar ligeramente las paredes para no doblarlas al introducir las en la boca.


3

Introducirlo en la boca, colocar rápidamente en posición y cerrar la boca sin apretar los dientes, evitando marcar el producto.

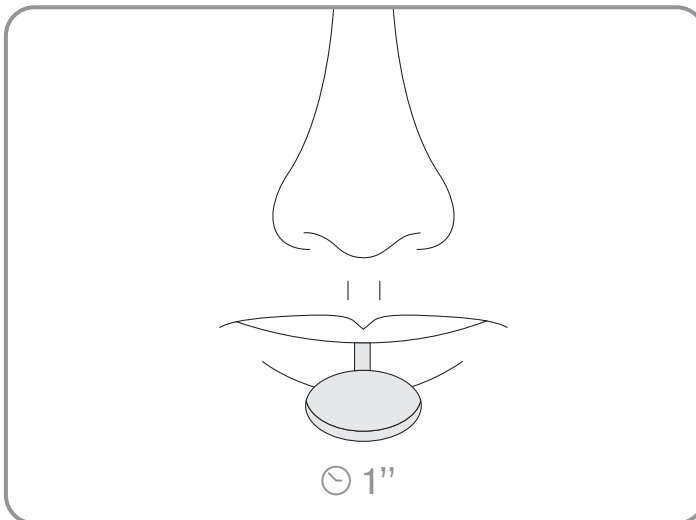


4

En esa posición, succionar el protector durante 1 minuto para adaptarlo a la forma de los dientes superiores, mientras tanto presionar con los dedos para asegurar el calce óptimo.

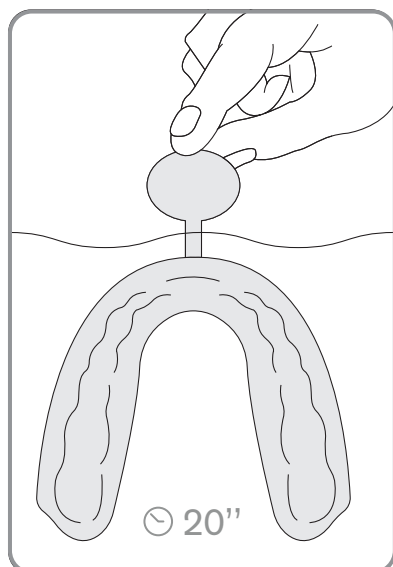

5

Transcurrido el tiempo, extraerlo de la boca y sumergirlo en agua fría al menos 20 segundos. El protector debe mantenerse colocado por sí solo, si esto no ocurre, repetir todo el proceso.

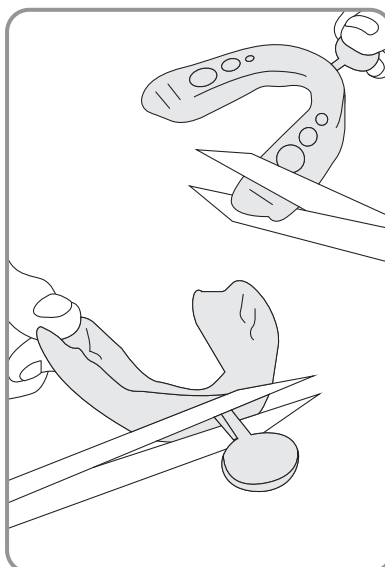

6

Cortar el saliente al ras del protector. En caso que sea muy largo, cortar los extremos con ayuda de las marcas de corte para una mayor comodidad.